
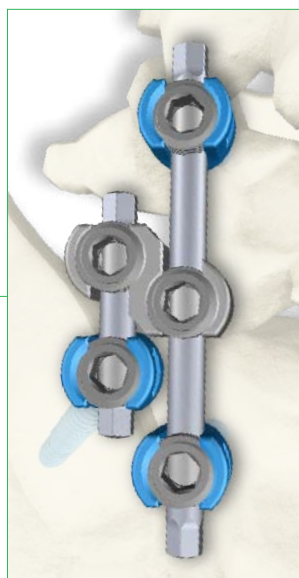


Generalidades del Sistema Vertebral Xia® 4.5

- Soluciones Integrales Posterior y Anterior
- Opciones de Fijación Torácica, Lumbar y Sacro-Íliaca
- Aplicación de Conector Extendido para el Crecimiento de la Construcción

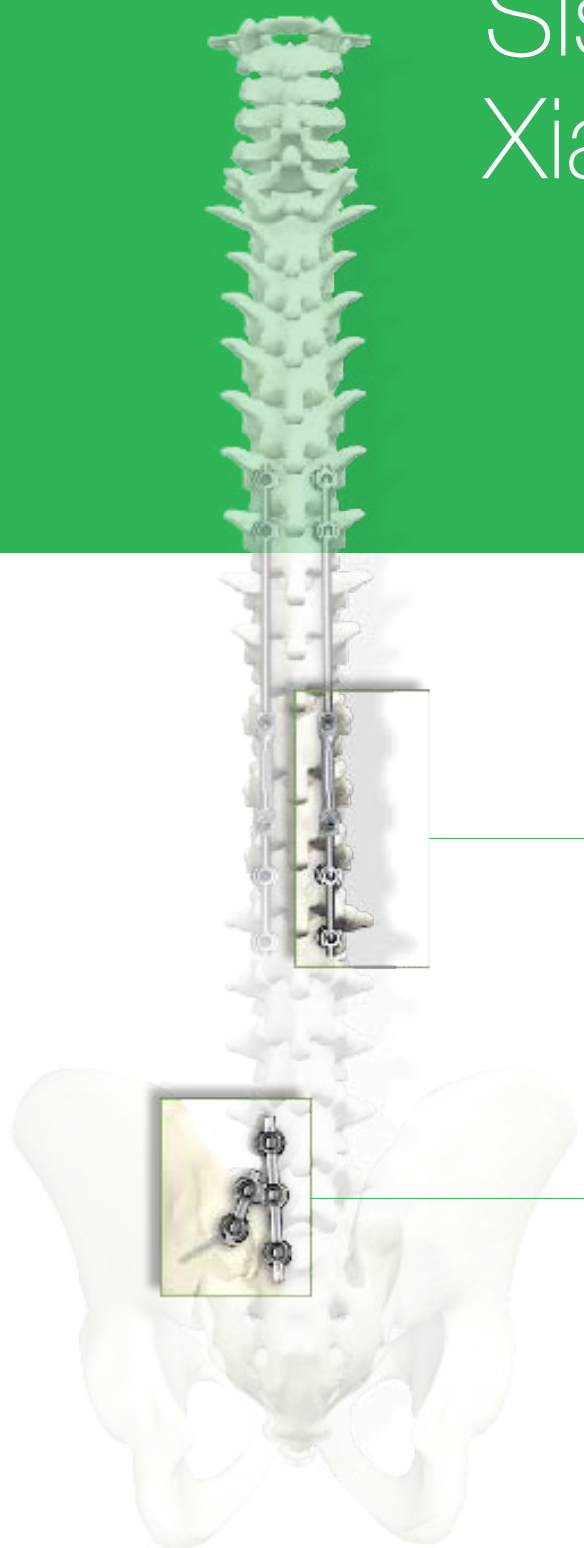

Oferta Integral de Implantes

Ganchos Laminares Lumbares



Ganchos Pediculados




Ganchos Laminares Torácicos




Ganchos de Proceso Transversales



Conectores Barra a Barra

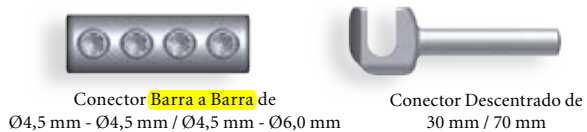

Barras

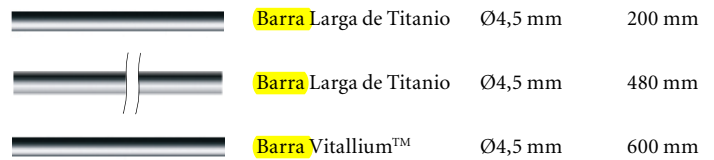


Grapas



Conectores Cruzados




Conectores Extendidos

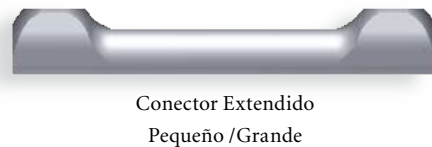


Conectores Iliacos



Tornillos Monoaxiales

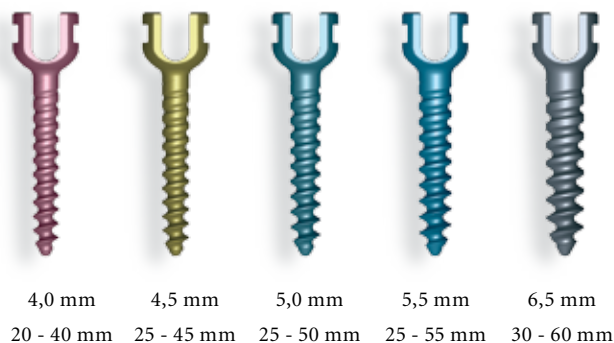

Tornillos Poliaxiales

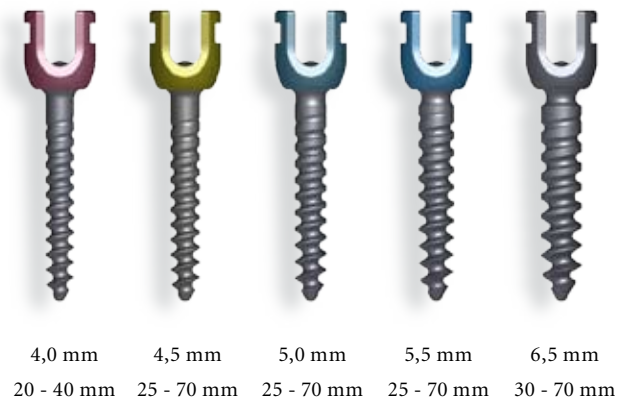


Soluciones Posterior y Anterior

Soluciones Posteriores Para

Traslación




Doblado in situ

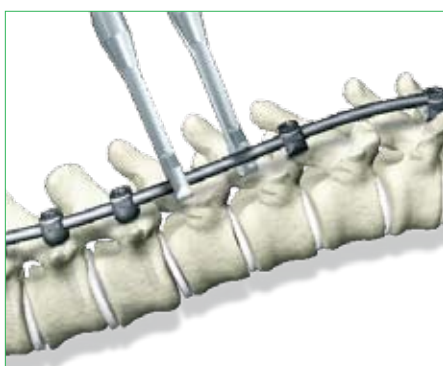

Distracción



Compresión

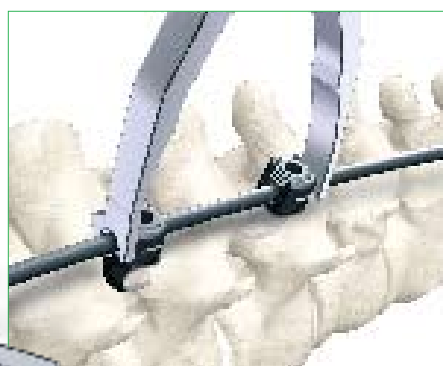

Soluciones Anteriores Para

Tumor traumático




Deformación



Soluciones Completas para Deformaciones

Diseños de Gancho

14 diseños de ganchos anatómicos para patologías de deformaciones y traumáticas.

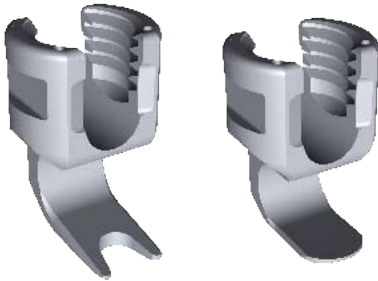

Conectores Extendidos

El sistema vertebral Xia® 4.5 ofrece conectores extendidos que permiten al cirujano extender la construcción con una distracción de hasta 60 mm.



Bloqueador Xia® 4.5

La tecnología patentada Xia® de rosca en forma de trapecio minimiza las fuerzas de expansión generadas durante el ajuste final y permite una mayor facilidad de inserción*.



Tornillos de 4,0 mm de Diámetro

Tornillos poliaxiales y monoaxiales de 4,0 mm disponibles para uso torácico.




Tornillo Poliaxial Xia® 4.5

- Bajo perfil
- Cono de angulación de 45 grados
- La rosca cortical/para hueso esponjoso ofrece una gran resistencia de extracción*



2 Tipos de Materiales de Barra

El sistema vertebral Xia® 4.5 tiene barras de aleación de titanio con punta hexagonal. Para lograr una construcción más rígida, también se encuentra disponible una barra Vitallium™ de Ø4,5 mm.

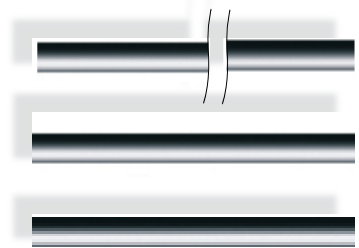

Sistema Vertebral Xia® 4.5

Soluciones Integrales

Instrumentos Sencillos y Ergonómicos


Nueva sonda torácica pedicular con forma de barra para tornillos torácicos.

La sonda de bola roma ofrece al cirujano una sensación táctil óptima.

Hay disponibles dispositivos inductores sencillos y efectivos como la horquilla baja barra y el persuader

Distractor con doble fin diseñado para la distracción de las cabezas de los tornillos, además de la distracción de los conectores extendidos Xia® 4.5.


El doblado in situ se puede realizar en el plano sagital y coronal usando las dobladoras in situ y coronal.

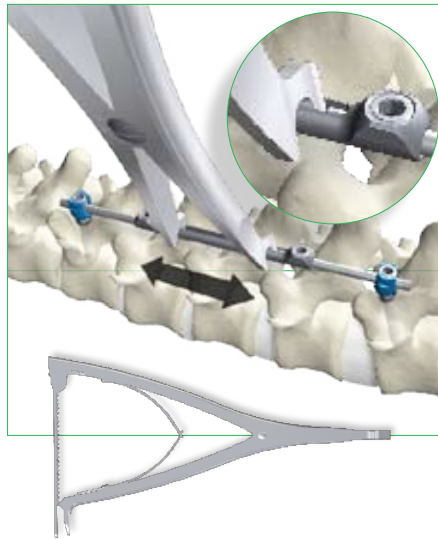

Fijación Sacro-Iliaca

Tornillos Poliaxiales

El sistema vertebral Xia® 4.5 ofrece tornillos poliaxiales en 60 mm y 70 mm para la fijación sacro-ilíaca.

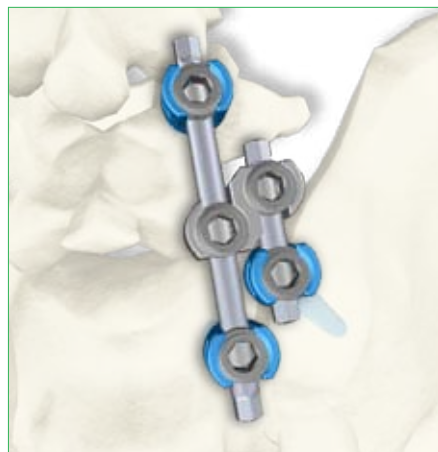

Conectores Iliacos

El sistema vertebral Xia® 4.5 ofrece una variedad de conectores ilíacos abiertos y en ángulo para una fijación sencilla y precisa al iliaco. Estos conectores utilizan el mecanismo de cierre de rosca en forma de trapecio Xia® 4.5 para un uso sencillo y seguridad.



Implantes Xia®

Número de Pieza Descripción

Tornillos Monoaxiales

48134020	Tornillo Monoaxial de 4,0 mm x 20 mm
48134025	Tornillo Monoaxial de 4,0 mm x 25 mm
48134030	Tornillo Monoaxial de 4,0 mm x 30 mm
48134035	Tornillo Monoaxial de 4,0 mm x 35 mm
48134040	Tornillo Monoaxial de 4,0 mm x 40 mm



48134525	Tornillo Monoaxial de 4,5 mm x 25 mm
48134530	Tornillo Monoaxial de 4,5 mm x 30 mm
48134535	Tornillo Monoaxial de 4,5 mm x 35 mm
48134540	Tornillo Monoaxial de 4,5 mm x 40 mm
48134545	Tornillo Monoaxial de 4,5 mm x 45 mm



48135025	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 25 mm
48135030	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 30 mm
48135035	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 35 mm
48135040	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 40 mm
48135045	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 45 mm
48135050	Tornillo Monoaxial de 5,0 mm x 50 mm



48135525	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 25 mm
48135530	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 30 mm
48135535	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 35 mm
48135540	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 40 mm
48135545	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 45 mm
48135550	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 50 mm
48135555	Tornillo Monoaxial de 5,5 mm x 55 mm



48136530	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 30 mm
48136535	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 35 mm
48136540	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 40 mm
48136545	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 45 mm
48136550	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 50 mm
48136555	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 55 mm
48136560	Tornillo Monoaxial de 6,5 mm x 60 mm



48130000	Bloqueador Xia 4.5
48133200	Barra Larga de Titanio de 200 mm
48133480	Barra Larga de Titanio de 480 mm
48132601	Barra Vitallium de 600 mm



48130220	Gancho Pedicular Pequeño
48130221	Gancho Pedicular Grande
48130201	Gancho Laminar Pequeño
48130202	Gancho Laminar Mediano
48130203	Gancho Laminar Grande
48130208	Gancho Laminar en Ángulo
48130210	Gancho Laminar Torácico
48130204	Gancho Laminar Extendido
48130230	Gancho de Proceso Transversal, Derecho
48130231	Gancho de Proceso Transversal, Izquierdo
48130214	Gancho Torácico Supralaminar, Derecho
48130215	Gancho Torácico Supralaminar, Izquierdo
48130212	Gancho Torácico Descentrado, Derecho
48130213	Gancho Torácico Descentrado, Izquierdo



48133224	Conector Cruzado Poliaxial, 24 a 30 mm
48133230	Conector Cruzado Poliaxial, 30 a 36 mm
48133236	Conector Cruzado Poliaxial, 36 a 45 mm
48133245	Conector cruzado Poliaxial, 45 a 60 mm
48133012	Conector Cruzado Monobloque, 12 mm
48133013	Conector Cruzado Monobloque, 13 mm
48133014	Conector Cruzado Monobloque, 14 mm
48133015	Conector Cruzado Monobloque, 15 mm
48133016	Conector Cruzado Monobloque, 16 mm
48133017	Conector Cruzado Monobloque, 17 mm
48133018	Conector Cruzado Monobloque, 18 mm
48133019	Conector Cruzado Monobloque, 19 mm
48133021	Conector Cruzado Monobloque, 21 mm
48133023	Conector Cruzado Monobloque, 23 mm
48133024	Conector Cruzado Monobloque, 24 mm



Número de Pieza Descripción

Tornillos Poliaxiales

48144020	Tornillo Poliaxial de 4,0 mm x 20 mm
48144025	Tornillo Poliaxial de 4,0 mm x 25 mm
48144030	Tornillo Poliaxial de 4,0 mm x 30 mm
48144035	Tornillo Poliaxial de 4,0 mm x 35 mm
48144040	Tornillo Poliaxial de 4,0 mm x 40 mm



48144525	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 25 mm
48144530	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 30 mm
48144535	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 35 mm
48144540	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 40 mm
48144545	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 45 mm
48144560	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 60 mm
48144570	Tornillo Poliaxial de 4,5 mm x 70 mm



48145025	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 25 mm
48145030	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 30 mm
48145035	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 35 mm
48145040	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 40 mm
48145045	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 45 mm
48145050	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 50 mm
48145060	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 60 mm
48145070	Tornillo Poliaxial de 5,0 mm x 70 mm



48145525	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 25 mm
48145530	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 30 mm
48145535	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 35 mm
48145540	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 40 mm
48145545	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 45 mm
48145550	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 50 mm
48145555	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 55 mm
48145560	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 60 mm
48145570	Tornillo Poliaxial de 5,5 mm x 70 mm



48146530	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 30 mm
48146535	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 35 mm
48146540	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 40 mm
48146545	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 45 mm
48146550	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 50 mm
48146555	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 55 mm
48146560	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 60 mm
48146570	Tornillo Poliaxial de 6,5 mm x 70 mm



48130110	Grapa de Orificio Doble Pequeña, Caudal
48130111	Grapa de Orificio Doble Pequeña, Rostral
48130112	Grapa de Orificio Doble Grande, Caudal
48130113	Grapa de Orificio Doble Grande, Rostral



48135000	Conector V a V Ø4,5 mm a Ø4,5 mm
48135001	Conector V a V Ø4,5 mm a Ø6,0 mm



48135101	Conector Descentrado de 30 mm
48135102	Conector Descentrado de 70 mm



48135103	Conector Extendido Pequeño
48135104	Conector Extendido Grande



48135105	Conector Paralelo
48135106	Conector Iliaco a 15 grados
48135107	Conector Iliaco a 25 grados
48135108	Conector Iliaco a 35 grados
48135109	Conector Iliaco a 45 grados



Instrumentos Xia®

	REF	Descripción
	675021	Punzón
	03807024	Sonda Roma
	48137055	Sonda Torácica Pedicular
	48137059	Sonda de Bola Roma
	480401540	Tornillo Macho de Roscar Modular de Ø4,0 mm
	48040154	Tornillo Macho de Roscar Modular de Ø4,5 mm
	48040150	Tornillo Macho de Roscar Modular de Ø5,0 mm
	48040155	Tornillo Macho de Roscar Modular de Ø5,5 mm
	48040156	Tornillo Macho de Roscar Modular de Ø6,5 mm
	48131320	Destornillador Monoaxial de Mango Redondo
	48131321	Vástago para Destornillador Monoaxial
	48131310	Destornillador Poliaxial de Mango Redondo
	48131311	Vástago para Destornillador Poliaxial
	48137025	Preparador Pedicular
	48137021	Preparador para Lámina
	48137027	Pinza para Gancho
	48131040	Pinza Lateral para Gancho
	48137029	Impactor para Gancho
	48130620	Plantilla de Barra de Ø4,0 mm
	48137800	Cortador de Barras de Ø4,5 mm
	48130140	Pinzas para Barra
	48137010	Dobladora Francesa
	48137018	Horquilla de Barra
	48137009	Tubo Introducutor
	48137016	Inducidor Pequeño
	48137019	Empujador de Barra
	48130100	Fórceps de Rotación de Barra
	48137056	Llave de Rotación de Barra
	48137058	Accionador de Bloqueador de 4 mm

	REF	Descripción
	48137008L	Introducutor Largo de Bloqueador de 4 mm
	48137008S	Introducutor Corto de Bloqueador de 4 mm
	48137011R	Barra de Doblado, Derecha
	48137011L	Barra de Doblado, Izquierda
	48130190R	Dobladoras del Plano Coronal, Derecha
	48130190L	Dobladoras del Plano Coronal, Izquierda
	48136000	Distractor
	48136100	Compresor
	48137026	Llave Antitorsi3n
	48137028	Llave de Torsi3n
	48130130	Calibre
	48130120	Pinza para Conector Cruzado
	48137057	Destornillador de 3 mm
	675023	Destornillador de 8 mm
	48130241	Impactor de Grapa Doble
	48130001	Caja de Implante - Tornillos y Conectores Cruzados
	48130002	Caja de Implante - Gancho y Componentes
	48130003	Caja 1 de Instrumentos
	48130004	Caja 2 de Instrumentos

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniomaxillofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

Stryker Latin America

3000 SW 148th Ave.
Suite 300
Miramar, FL 33027
t: 954.538.8200 f: 954.538.8215

www.stryker.com/latinamerica

Xia es una marca comercial registrada de Stryker Spine.

La información presentada en este folleto tiene como fin mostrar un producto Stryker. Consulte siempre el folleto incluido en el empaque, la etiqueta del producto y/o las instrucciones para el usuario antes de usar cualquier producto Stryker. Los cirujanos siempre deben confiar en su propio juicio clínico al decidir qué productos y técnicas usar con sus pacientes. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. La disponibilidad de productos está sujeta a las normas reguladoras o médicas que rigen los mercados específicos. Por favor, póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene preguntas sobre la disponibilidad de productos Stryker en su área.

Los productos a los que se hace referencia con la denominación TM son marcas comerciales de Stryker.
Los productos a los que se hace referencia con la denominación [®] son marcas comerciales registradas de Stryker.

Número de las publicaciones: TKX45BR06051
BD/GS 1.5m 23/06

Copyright © 2006 Stryker
Impreso en Alemania

